



## Harris 苏木素染液说明书

货号: S-1513

规格: 100ml

产品组成:

组成	Harris 苏木素
保存	室温避光
说明书	1 份

### 产品简介:


苏木素为碱性天然染料, 可使细胞核着色。细胞核内染色质的成分主要是 DNA, 在 DNA 双螺旋结构中, 两条核苷酸链上的磷酸基向外, 使 DNA 双螺旋的外侧带负电荷, 呈酸性, 很容易与带正电荷的苏木素碱性染料以离子键或氢键结合而被染色。苏木素在碱性溶液中呈蓝色, 所以细胞核被染成蓝色。

有效期: 12 个月

### 操作步骤:

1. 根据实验具体需求操作。
2. Harris 苏木素染色时间为 5-10 分钟, 蒸馏水返蓝。

### 染色结果:

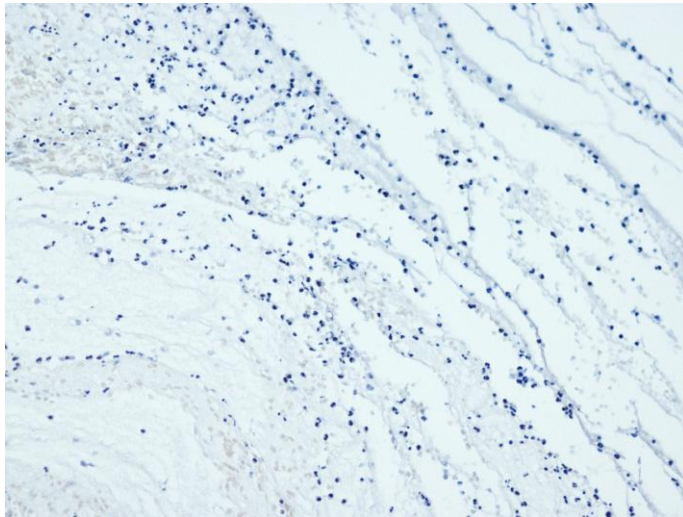

鼻组织×200

### 结果判定:

细胞核呈蓝色。